

**MAGIC 1000**



**MAGIC 2000**



**MAGIC 3000**



## Magic Line hev- og senkbare badekar

Magic Line består av tre badekarmodeller Magic 1000, 2000 og 3000. Hver modell kan tilpasses brukerens behov ved hjelp av valgfritt utstyr.

# Magic - en perfekt nyskapning

Magic er kvalitetsprodukter med mange muligheter. Den perfekte kombinasjon av brukervennlighet for pleiepersonalet og velvære for brukeren oppfylles i dette fremtidsrettede produktet.

Med tanke på den oppdaterte tekniske sikkerheten og hygieniske utstyr oppfyller Magic hev/senkbart badekar de høyeste krav til funksjon, ergonomi og komfort.

Materialer av høy kvalitet og skånsom produksjon i kombinasjon med kunnskap basert på mange års erfaring, har resultert i holdbare, sterke og stabile produkter.

Magic finnes i tre modeller (1000, 2000, 3000). Hver modell kan tilpasses brukerens behov ved hjelp av valgfritt utstyr og tilbehør.


Magic serien kan leveres med vannmassasjedyser.



## Beskrivelse av Magic badekarserie

- Badesystemet aktiveres kun ved bruk av magnetkort
- Badekaret er produsert i glassfiber
- Konsoll og deksel er laget i ABS plast
- Høydejusterbare ben
- Håndtak for økt sikkerhet
- Beskyttende gummilist rundt badekaret
- Badekarets ergonomiske design gir brukeren god plass, og gjør arbeidet enklere for pleieren
- Betjeningspanel for bruk av elektroniske funksjoner
- Fylling av badekaret til tre forhåndsinnstilte nivåer. Manuell stopp gjør det mulig å avslutte fyllingen når som helst
- På betjeningspanelet har brukeren god oversikt over selve badesystemet
- Termostatkran for temperaturregulering, med elektronisk visning av vanntemperaturen ved fylling, dusj og bad
- Badekarsystemet kan tilpasses individuelt
- Pasientdusjen har 210cm hvit slange og av-og-på knapp for regulering av vannet
- Dusjholderen har dråpefanger
- Strømspareren slås på automatisk når badet er over
- Ett sluk
- Heving og senking av badekaret skjer fra betjeningspanelet
- To elektriske brytere for høyderegulering i alle nivåer
- Batteri til nødsenk
- Ventiler og koplinger er i standard utførelse
- Innbygget tilbakeslagsventil

## Velvære for bruker og pleier

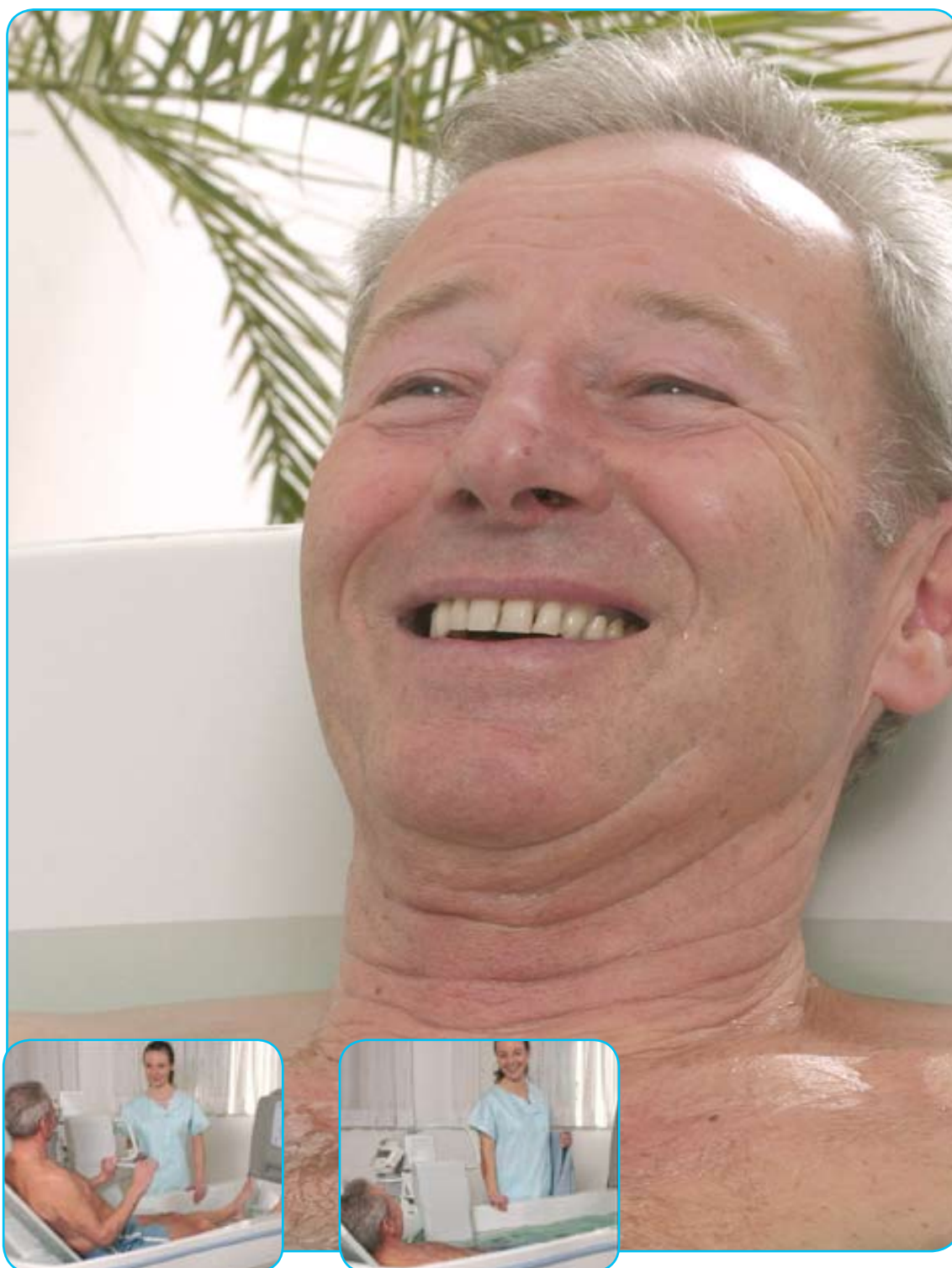


# Magic 3000




## Detaljer

- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | Deksel   | 9  | Automatisk dusjstopp (uten trykk når den ikke er i bruk)          |
| 2 | Automatisk dusjstopp (uten trykk når den ikke er i bruk)                           | 10 | Gummilist   |
| 3 | Servicevennlig inspeksjonsluke   | 11 | Patentert 5-dysers vannmassasje med individuelt utskiftbare dyser |
| 4 | Integrerte armlener med grep   | 12 | Dysedeksel som kan tas av for å vaskes                            |
| 5 | Høydejusterbare støtteben  | 13 | Hev/senk funksjon med integrert nødsenk                           |
| 6 | Badekaret har ergonomisk utførelse   | 14 | Tre forhåndsprogrammerte fyllingsnivåer                           |
| 7 | Brukervennlig kontrollpanel med digital visning av bade- og vanntemperatur         | 15 | Integrert desinfeksjonssystem med programmerbar brukstid          |
| 8 | Kraner med integrert badeolje- og shampo beholdere med automatisk beholder rensing | 16 | Riller for plate til forkorting av badekaret                      |

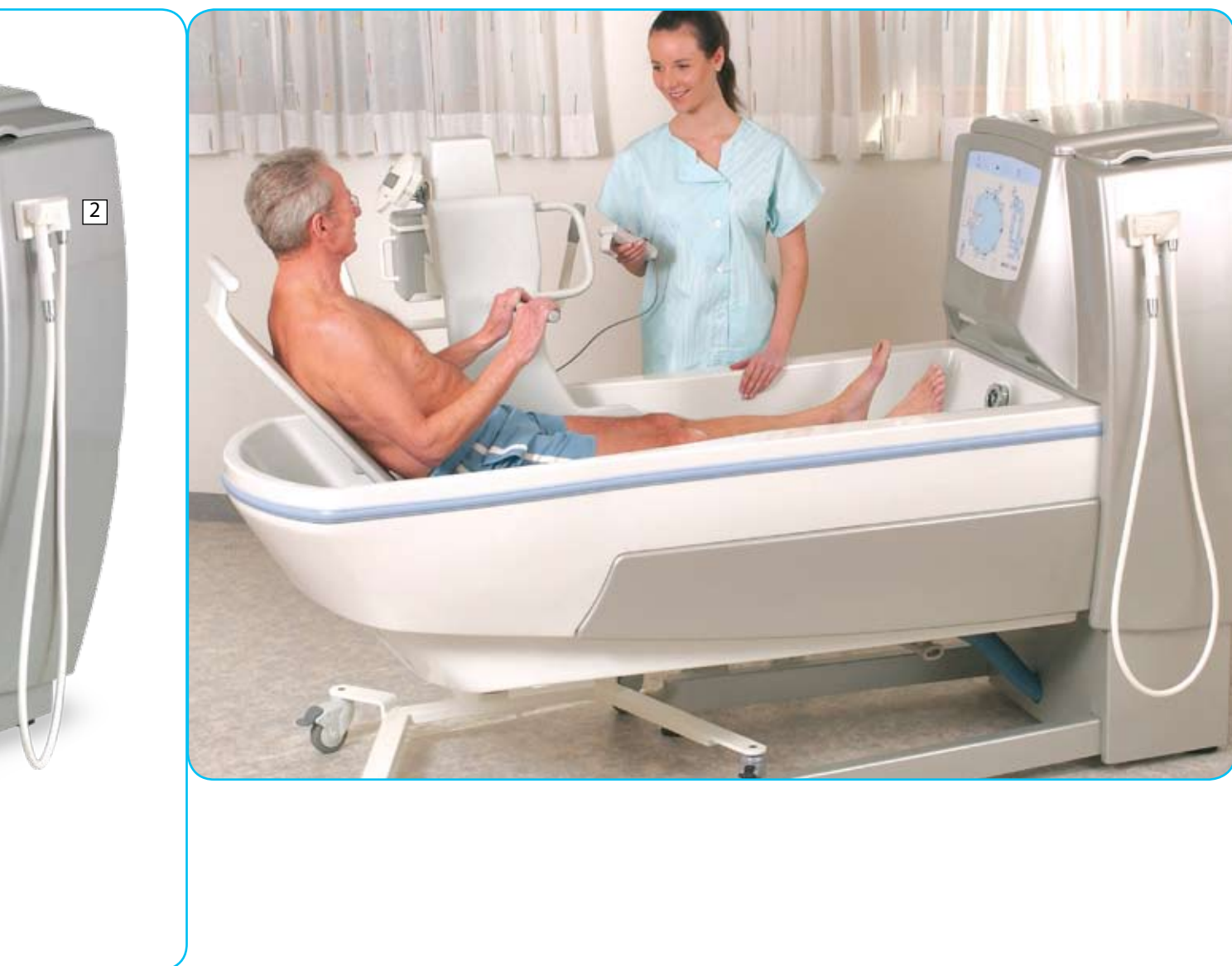

## Fakta

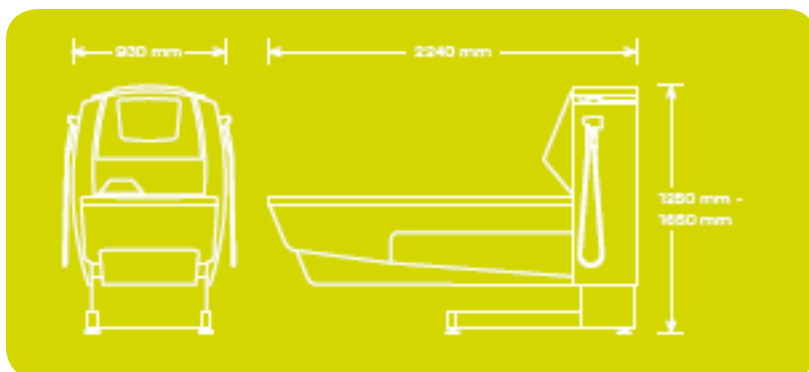

### Artikkel

Magic 1000  
Magic 2000  
Magic 3000

### Art.nr.

GK410000  
GK420000  
GK430000

### Valgfritt utstyr, må spesifiseres ved bestilling:

Magic 1000	Magic 2000	Magic 3000
GK410010 Desinfeksjonssystem	GK420010 Desinfeksjonssystem	GK430010 Desinfeksjonssystem
GK410020 Shampo/badeoljedispenser	GK420020 Shampo/badeoljedispenser	GK430020 Shampo/badeoljedispenser
GK410030 2 jet vannmassasjedyser	GK420030 2 jet vannmassasjedyser	
	GK420040 5 jet vnnmassasjedyser	GK430040 5 jet vannmassasjedyser
GK410050 Ultralydssystem	GK420050 Ultralydssystem	GK430050 Ultralydssystem
GK410080 Kortere badekar	GK410080 Kortere badekar	GK410080 Kortere badekar
<b>Tilbehør som passer alle modeller, må spesifiseres ved bestilling</b>		
GK150070 Kobling med massasjekar		
GK150090 Nakkepute		
GK156100 Undervannslys		
GK410080 Kortere badekar enn standard		

### Teknisk informasjon

Maks brukervekt:	150 kg
Batterilader:	Integrert
Mål:	B 93 cm x L 224 cm x H 125 - 165 cm
Høydejusterbar:	68 - 108 cm:
Vekt:	200 kg
Kapasitet:	180 liter
Nødsenk	Ja

## Fakta

Standard	Magic 1000	Magic 2000	Magic 3000
Magnetkort	x	x	x
Hev/senk funksjon	x	x	x
Nødsenk	x	x	x
Betjeningspanel	x	x	x
<b>Sikkerhet</b>			
Digital regulering av vanntemperatur	-	-	x
Digital regulering av dusjtemperatur	-	-	x
Manuell termostat for bade- og dusjtemperatur	x	x	-
Automatisk fyllingsstopp	x	x	x
Reduksjonsventil for dusj- og desinfeksjonsslange	-	x	x
Automatisk aktivering av dusj og desinfeksjon når de løftes ut av holderen			
Digital visning av vanntemperatur	x	x	x
Digital visning av dusjtemperatur	x	x	x
Automatisk tømning	-	-	x
Automatisk fyllingsstopp når sluket er åpent	-	-	x
<b>Pleie</b>			
Komplett system for tilsetninger i bade- og dusjvannet	o	o	o
Automatisk rensing av beholdere	-	o	o
<b>Desinfeksjon</b>			
Desinfeksjonssystem	o	o	o
Desinfeksjonssystem med programmerbar starttid	-	o	o
Desinfeksjon utkoplet når badekaret er fullt	-	o	o
Automatisk rensing av vannmassasjesystemet etter desinfeksjon	-	o	o
<b>Terapi</b>			
Ultralyd system	o	o	o
Undervannslus	-	o	o
5 jet vannmassasjedyser	o	o	o
2 jet vannmassasjedyser	o	o	-
Vannmassasje med regulerbar intensitet	-	o	o
Vannmassasje med enkeltkontrollerte dyser	-	-	o

x = inkludert    o = valgfritt    - = ikke tilgjengelig

# Magic Line hev- og senkbare badekar



Produsent Georg Krämer Ges. m.b.H. & Co. KG

Det tas forbehold om tekniske endringer.

Etac AS  
Postboks 249, 1501 Moss  
TELEFON 815 69 469 -58FAKS 69 27 09 11  
E-POST hovedkontor@etac.no INTERNETT www.etac.no

**etac**  
Skaper muligheter