




Nova Løftemotor – et anvendelig og sikkert hjelpemiddel

Med Nova takløftersystem er belastningene små ved forflytninger fra gulv, seng, toalett og rullestol. Det fast installerte systemet gjør løftene sikre og enkle å håndtere.

Energivennlig motor med 250 kg løftekapasitet

Den nye, kompakte løftmotoren er meget energivennlig, takket være en utveksling basert på nyeste teknologi. Motoren bygger på batteridrift og har kapasitet til å løfte 250 kg. Enkelhet kombinert med diskret design gjør at motoren passer i alle miljøer. Den er lett å bruke og styres med en brukervennlig, ergonomisk utformet håndkontroll. For å forenkle monteringen, er motoren utstyrt med Quick Release kopling.

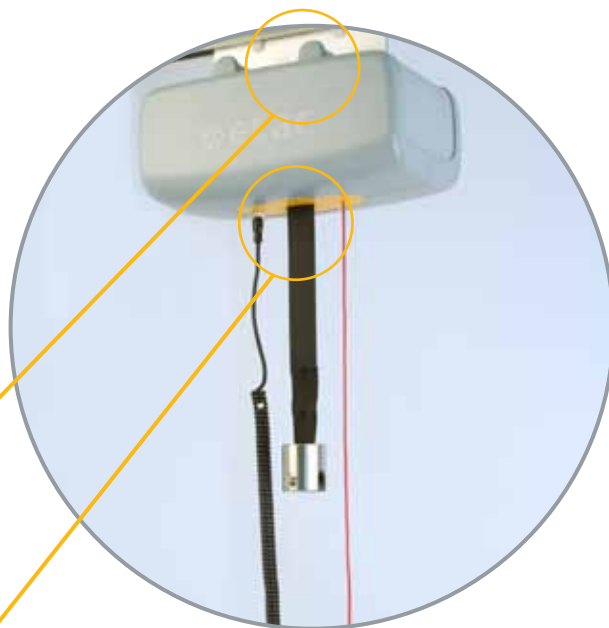

Quick Release kopling gir rask montering – uten verktøy. Lett å flytte fra rom til rom.



Gjennomtenkt design med feste for håndkontroll, løftebånd og nødstop.



Enkel og ergonomisk utformet håndkontroll.



Praktisk håndkontrollholder som også fungerer som en holder under lading.

HMS Art.nr.	Art.nr.	Artikkel
162639	16019001	Nova 100 Løftemotor inkl løftebøyle
162640	16019001-1	Nova 100 Løftemotor inkl løftebøyle og løpevognmotor

Teknisk informasjon

Maks brukervekt:	250 kg	Nødсенk:	Ja
Batterilader:	3-trinns lader 24V DC 1,5A maks	Advarsel ved lav batterispenning:	Ja
Ladetid:	7 timer	Advarsel ved overskredet maks last:	Ja
Løfthastighet:	6 cm/sek	Maks mål fra tak (skinne small):	2880 mm
Mål løftemotor:	B 325 mm x H 165 mm x D 184 mm	Minimum mål fra tak (skinne small):	380 mm
Vekt løftemotor:	10,5 kg	Løfthøyde:	2500 mm
Løftebånd:	Bredde 35 mm, tykkelse 1 mm	Elektrisk tilkopling av lader:	100-240V 50-60Hz
Beskyttelsesklasse motor:	IP 43		
Beskyttelsesklasse håndkontroll:	IP 54		
Nødstop:	Ja		



Riktig bøyle gir økt stabilitet og komfort

Fire ting avgjør valget av løftebøyle: Brukerens bredde og vekt, fysisk status og hvilken type løfter som benyttes.

Riktig bøyletype gjør ikke bare løftet mer behagelig for brukeren, men gjør det også sikrere og mer stabilt. Bøylens bredde påvirker løftet, og størrelsen må stemme med brukerens skulderbredde, for å oppnå et jevnt og sikkert løft. Hvis brukeren er utrygg kan en smalere bøyle holde løftet mer samlet, og dermed skape større trygghet. Er bøylene for bred for brukeren kan løftet føles ustabil. Nova bøylor er markedets letteste bøylor. De er enkle å håndtere og rengjøre. Alle bøylor har en hurtigkopling som gjør det enkelt å bytte modell. Samtlige bøylor kan benyttes på takløfter, friløfter og mobil personløfter.



2-punktsbøyle Small, 30 cm bred.
HMS Art nr. Art.nr.
162716 81560



2-punktsbøyle Medium 45 cm bred.
Art.nr. Leveres som standard med
81561 Nova 300



2-punktsbøyle Large 50 cm bred.
HMS Art nr. Art.nr.
162717 81562



Kryssbøyle Small 50 x 25 cm
HMS Art nr. Art.nr.
162718 81563



Kryssbøyle Large 50 x 40 cm.
HMS Art nr. Art.nr.
162719 81564



Bøyleholder
HMS Art nr. Art.nr.
162720 81568

Kryssbøylene brukes når man ønsker større avstand mellom løfteseilets ben og ryggbånd. Fire kroker gir løftet ekstra stabilitet. Samtidig fordeles vekten over en større flate, noe som bidrar til økt komfort.

Den store modellen åpner hoftveinkelen ytterligere, i forhold til den lille kryssbøylene.

Denne kryssbøylene gir generelt større bakoverhelling i seilet.

En holder til å feste på veggen for oppbevaring av bøylor og seil.

Et løfteprogram utviklet for pleiere

Hver tredje anmeldte arbeidsskade innen pleie- og omsorgsyrtet er forårsaket av tunge løft. Det forklarer hvorfor 7 av 10 pleiere opplever sitt arbeid som tungt. Det vil vi endre på.

I samarbeid med pleiere har vi utviklet løfteprogrammet Nova. Et program med løftere, opplæring og personlig støtte for pleiere.

Hensikten med løfteprogrammet er å tilby et kostnadseffektivt sortiment som gjør det mulig for flere arbeidsplasser innen pleieyrket å investere i bedre arbeidsmiljø. For, med riktig hjelpemiddel på rett sted, kan vi minske antallet tunge løft. Nova er et godt gjennomarbeidet sortiment som består av: mobil personløfter, mobil oppreisningsløfter, takløftersystem, friløft, bøylor, seil og seler.

Ved å arbeide aktivt for et bedre arbeidsmiljø vil ikke 1 av 3 pleiere få skader. Ta gjerne kontakt med våre fagkonsulenter hvis du vil vite hva vi kan gjøre for å forbedre din arbeidssituasjon.

Etac er leverandør av hjelpemidler for personer med nedsatt bevegelse. Vi har i dag ca. 400 ansatte fordelt på Sverige, Norge, Danmark, Tyskland og England.

For mer informasjon om vårt løfteprogram Nova, se www.etac.no