




Etac Nova 30

Diskrete skinner og få, smarte detaljer gjør Nova 30 til et moderne skinneresystem som er enkelt å montere og bruke.

 **etac**[®]

Etac Nova 30 - rett og slett.

Nova 30 er et funksjonelt skinnesystem med tidløs og enkel design. Skinnene finnes i tre forskjellige profiler, i lengder opp til 8 meter. Selv om skinnene er av de letteste i markedet, så kreves det få fester. Avhengig av tak- og veggkonstruksjonen kan skinnesystemet monteres i tak, vegg eller med gulvstolper. Systemet skal installeres av vår serviceavdeling.

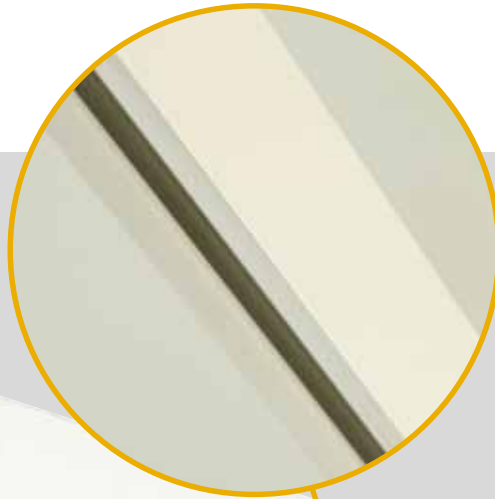

Enkel og sikker design

Nova 30 har diskret og moderne design. Funksjon og montering var i fokus da vi utviklet skinnesystemets design. Det som er enkelt er lett å forstå, gjør det trygt å bruke.



Enkel montering med få detaljer

Nova 30 er enkel og grei. Takket være få monteringsdetaljer med enkle og smarte funksjoner spares tid og kostnader. Noen deler er allerede klargjort før levering, for eksempel kapping og boring.

15 års garanti

Etac gir 15-års garanti på Nova 30 mot fabrikkfeil eller materialer



Tetningslist

Unngå uhygienisk støvansamlinger på takmontert skinne ved bruk av tetningslist. Listen leveres i ruller à 33 m og festes enkelt med tape. Fåes i hvitt og grått.



Løpevogn Travers

Diskret utformet løpevogn for romdekkende monteringer. Samme løpevogn brukes på under- og mellom-hengt travers.

Tekniske data Nova 30

Skinne materiale	Aluminium	Bredde gulvstolpe	55 mm
Farger	Hvit lakkert eller naturanodisert aluminium	Minstemål fra tak til underkant skinne med takfeste:	
Høyde skinneprofil		S	84 mm
S	58 mm	M	148 mm
M	122 mm	L	196 mm
L	170 mm	Maks brukervekt	250 kg
Bredde skinneprofil	55 mm	Fyller kravene iht.	ISO 10535
Avstand mellom festepunkter			MDD 93/42/EEC
S	1,8 m	Garantitid:	15 år
M	4,8 m		
L	7,2 m		



Detaljer Etac Nova 30

Alle monteringsdetaljer er utformet slik at så få deler som mulig må benyttes. I tillegg er de fleste detaljer i samme bredde, slik som skinner, gulv-fester, veggfester og takfester, noe som ytterligere bidrar til at Nova 30 har en diskret og moderne design.



Skinneprofiler

Skinneprofilene finnes i følgende skinnehøyder:

S (58 mm)

M (122 mm) og

L (170 mm).

Hvit og ALU.

Materiale: Aluminium

Skinne bestilles etter mål i cm.



Kurveskinne 45 grader

Hvit og ALU.

Materiale: Aluminium

Art.nr: 27015



Kurveskinne 90 grader

Hvit og ALU.

Materiale: Aluminium

Art.nr: 27014



Gulvstolpe rett

Standard 2500 mm, eller i valgfri kappet lengde opp til 3500 mm. Fot- og skinnefester inngår.

Hvit og ALU.

Materiale: Aluminium

Art.nr:

27021 Standard

27022 0-2500 mm

27023 2500-3000 mm



Takpendler

For nedpendling av skinner finnes fem teleskop-pendler i størrelser mellom 100-1000 mm.

Justeringshullene har en presisjon på 5 mm.

Hvit og grå.

Materiale: Stål

Art.nr:

27030 100-135 mm

27031 135-200 mm

27032 220-345 mm

27033 345-580 mm

27034 580-1000 mm



Gulvstolpe med bue

Enkel-, dobbeltbue eller bue for gulvlist Skjøtestykke og deksel er inkludert.

Kombineres med gulvstolpen nevnt over.

Hvit og ALU.

Materiale: Aluminium

Art.nr:

27024 Enkelbockad

27025 Dubbelbockad

27026 Golvlist



Løpevogn standard

Også egnet for kurveskinner.
Materiale: Stål, POM, PUR,
NBR og PA-6
Art.nr: 27047



Løpevognmotor

Elektrisk motor som forenkler
og hjelper til ved forflytning i
skinnen.
Materiale: Stål, POM, PUR
og NBR.
Art.nr: 82162



Løpevogn travers

Til romdekkende skinnesys-
tem. Mellom- eller under-
hengt. Ved mellom-hengt
kompletter med art.nr:
27018. Grå og hvit.
Materiale: Stål, POM, PUR,
NBR, aluminium og PA-6
Art.nr: 27049



Fot til gulvstolpe

Kan lett tilpasses for eksem-
pel våtromsbelegg. Inkludert i
gulvstolpen. Grå.
Materiale: POM
Art.nr: 50470



Deksel

Dekker borrehullene på gulvs-
tolpen.
Hvit og grå.
Materiale: PE
Art.nr:
21666 Vit
81667 Grå



Mutterdeksel

Materiale: PE
Art.nr:
821161 M10 Vit
82192 M10 Grå
80303 M8 Grå



Deksel gavli

For pen avslutning av skinnen.
Samme deksel til alle profil-
størrelser. Lett å brette av for
tilpassing til valgt profil.
Hvit og grå.
Materiale: PP
Art.nr: 50468



Deksel for tak

Monteres på pendel mot
taket for å skjule for
eksempel borrehull.
Hvit.
Materiale: ABS
Art.nr: 27038



Fast endestopp

Enkel å montere på oppsatt
skinne. Standard grunnmodell.
Hvit og grå.
Materiale: stål og aluminium
Art.nr: 27016



Flyttbar endestopp

Flyttes lett i skinnen. Kan
installeres på montert skinne.
Selges som tilbehør.
Hvit og grå.
Materiale: stål og aluminium
Art.nr: 27017



Sett for montering oppå skinnen

Brukes sammen med veggfeste eller skinnefestet gulvstolpe, for montering av skinne oppå festet.

Hvit og grå.

Materiale: stål og aluminium

Art.nr: 27028



Skinnefestet gulvstolpe

Monteres i gulvstolpen og festes til skinnen. Montering under eller over. Inkludert i gulvstolpe. Hvit og grå.

Materiale: Stål

Art.nr:

82125 Vit

82124 Grå



Veggfeste

Monteres på skinnens kant eller side. Under eller overmontering. Hvit og grå.

Materiale: Stål

Art.nr: 27020



T-bolt med låsemutter

Forankrer skinnen til festet.

Finnes i to lengder, 30 mm og 40 mm.

Materiale: Stål

Art.nr:

27036 30 mm

27055 40 mm



Skjøtestykke

Brukes ved skjøting av takmonterte skinner.

Materiale: Stål

Art.nr: 27039



Avstandsstykker

For tilpassing ved ujevnheter.

Finnes i 1, 2 og 5 mm.

Hvit og grå.

Materiale: POM

Art.nr:

50040 1 mm grå

50041 1 mm vit

50042 2 mm grå

50043 2 mm vit

50044 5 mm grå

50045 5 mm vit



Takfeste

Fester takskinnen mot taket.

Tre ulike monteringsalternativer.

Hvit og grå.

Materiale: Stål

Art.nr: 27019



Tetningslist

Dekker mellomrommet mellom taket og skinnen. Rull på 33 m.

Festet til skinnen med tape.

Hvit og grå.

Materiale: PP

Art.nr: 50050

82109: Tape tetningslist rull

33 m




Skjøtestykke, gulvstolpe

Skjøtestykke for rett og buet gulvstolpe. Skruer og muttere medfølger. Inkludert i settet gulvstolpe buet.

Materiale: Stål


Art.nr: 27056

Eksempler på utførelse

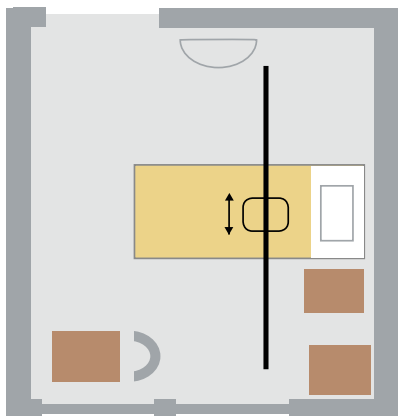


Rett skinne

Når rommets utforming tillater enkle løft sideveis

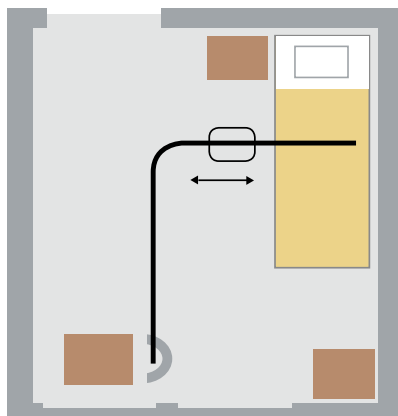

Kurvete skinne


Installasjon med kurvet skinne gir større fleksibilitet ved forflytninger i hele rommet (kun ved takmontering)

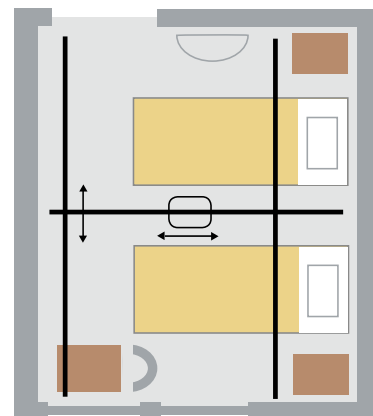

Travers / Romdekkende


To faste skinner og en flyttbar skinne for mellom- alternativt underhengt travers. Ved flere brukere eller for ubegrenset antall løfteplasser.

Eksempler på montering

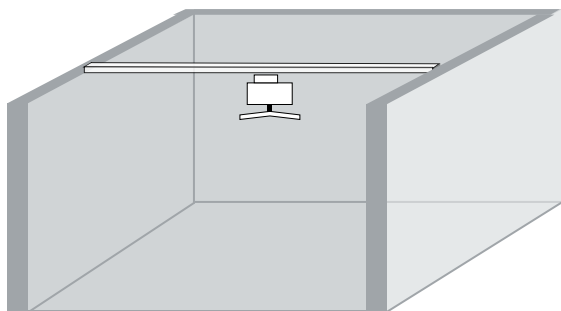

Tak


I betongtak, her kan alltid small-profilen brukes. Minimalt med synlige deler og inngrep i rommet.

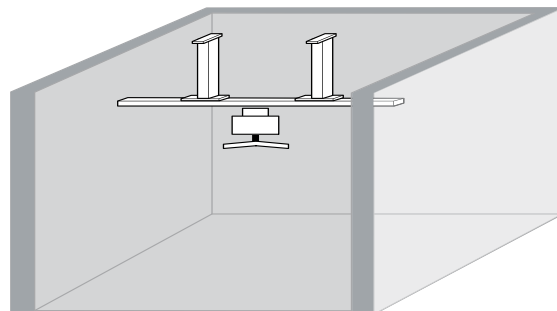

Tak - pendling


Teleskop-pendler som justerer høyden på skinnerystemet.

Brukes hvis takhøyden er svært høy, eller hvis interiøret, for eksempel armaturer, er i veien for monteringen, samt for eksempel ved montering av skinne mot undertak. Pendlene er tilgjengelig i 5 størrelser, 10 cm - 100 cm.

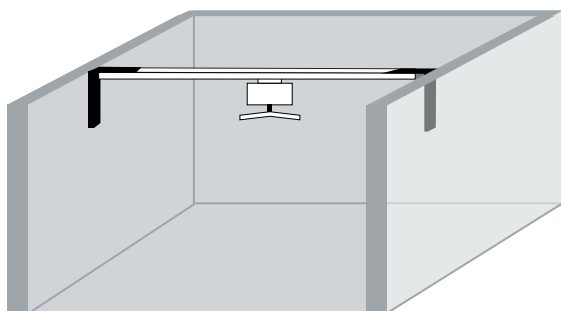

Vegg

Der det av en eller annen grunn ikke er mulig å montere i taket brukes veggfester.

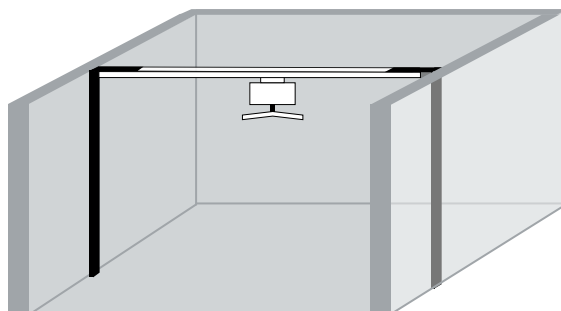

Gulv

Hvis det ikke er mulig å montere verken i tak eller vegger, kan systemet monteres ved bruk av gulvstolper.


Et løfteprogram utviklet for pleiere.

I samarbeid med helse- og omsorgssektoren har vi utviklet løfteprogrammet Nova. Et program med løftere, opplæring og personlig støtte for pleiere. Målet med løfteprogrammet er å tilby et kostnadseffektivt sortiment som gjør det mulig for flere arbeidsplasser i helsesektoren å investere i et bedre arbeidsmiljø. For med rett hjelpemiddel på rett plass, kan vi redusere mengden av tunge løfteoperasjoner. Nova er et grundig gjennomarbeidet sortiment bestående av mobile personløftere, mobil oppreisningsløfter, takløftersystem, friløfter, bøylor, seler og seil.

Ta kontakt med våre eksperter hvis du vil vite hva vi kan gjøre for å forbedre arbeidsplassen din.

Etac er en totalleverandør av hjelpemidler for personer med nedsatt bevegelse. Vi er for tiden rundt 500 ansatte fordelt på Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, England og Nederland.

For mer informasjon om vårt løfteprogram Nova, se www.etac.no

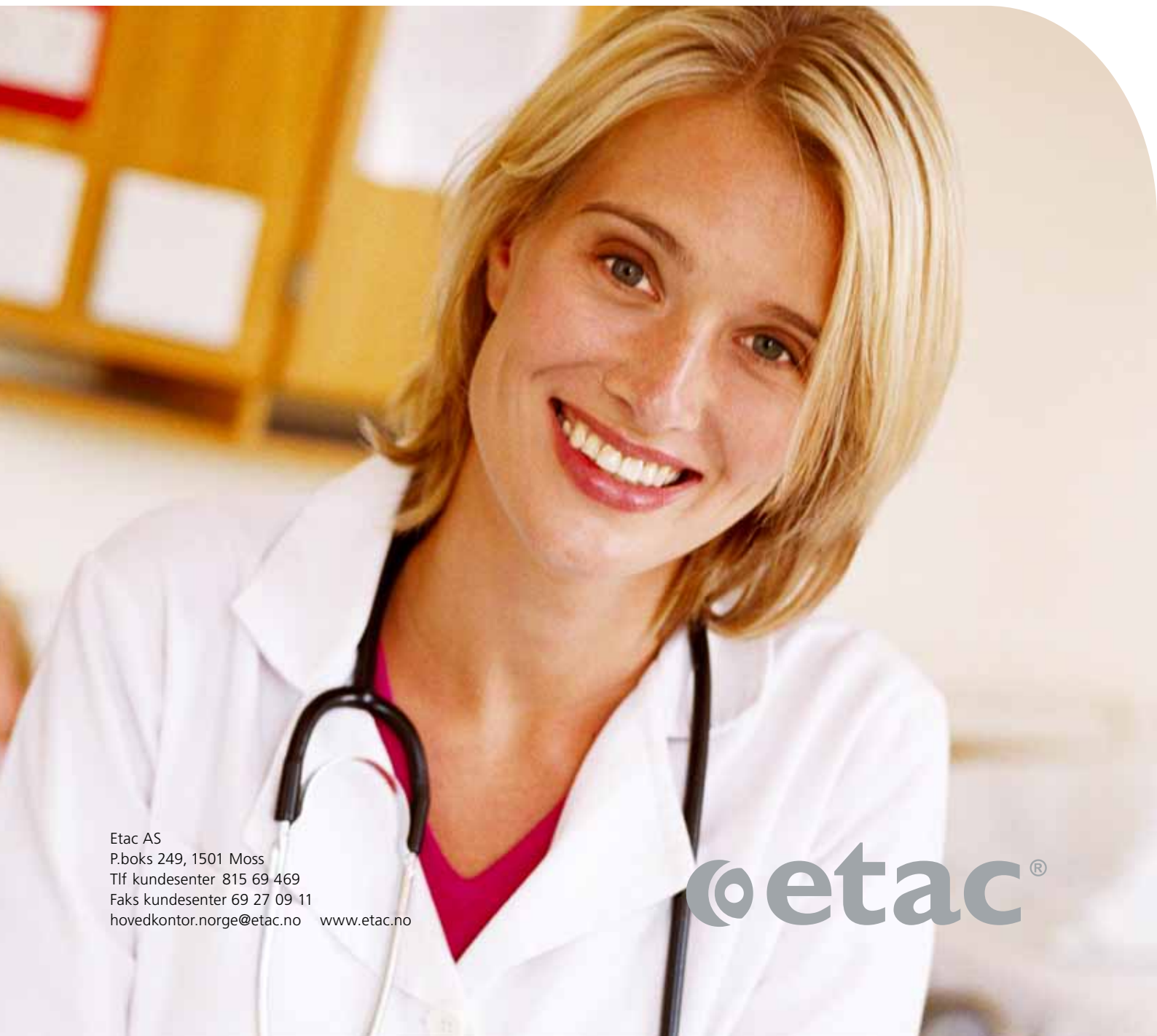

Etac AS
P.boks 249, 1501 Moss
Tlf kundesenter 815 69 469
Faks kundesenter 69 27 09 11
hovedkontor.norge@etac.no www.etac.no

etac®