



## Seta - en moderne sykehusseng av høy kvalitet

Seta er en sykehusseng som kombinerer høy funksjonalitet og moderne design med god økonomi. Det hensiktsmessige sakseløftet øker sengens stabilitet og er tilpasset høy brukervekt. Sengens glatte flater letter rengjøring. Seta sengens innstillinger og funksjoner er elektriske. Seta leveres med håndkontroll og betjeningspanel i fotende. Med betjeningspanelet kan man låse innstillinger og funksjoner av liggeflaten. Sjøkkleie betjenes også fra betjeningspanelet.



## Seta

- Aktiv/dynamisk rygg
- Integrerte teleskopgrinder
- Rengjøringsvennlig
- Høy funksjonalitet

Lev. art. nr.	Produkt	Beskrivelse
ST179951	Seta	Rammefarge sølv. Integrerte teleskop grinder.
ST179951-1	Seta	Rammefarge hvit. Integrerte teleskop grinder.

## Produktbeskrivelse

<b>Innvendige mål</b>	B 90 x L 200cm
<b>Yttermål seng</b>	B 103 x L 218cm
<b>Madrassmål</b>	B 90 eller 85 x L 200cm
<b>Liggeflate</b>	4-delt, plater av ABS plast
<b>Rygg</b>	Ryggdelen har utløser for hurtigfelling
<b>Sengeforlenger</b>	Innebygget sengeforlenger på 20cm
<b>Madrasstøtter</b>	4 stk, 2 i hver ende
<b>Høydeinnstilling uten madrass</b>	38 - 83 cm
<b>Infusjonsstativ</b>	Feste 4 stk, 2 i hver ende
<b>Grinder, integrerte/teleskop</b>	H 38 cm over liggeflaten (uten madrass). Kan forlenges
<b>Avviserhjul</b>	4 stk, ett i hvert hjørne
<b>Hjul</b>	150 mm med sentralbrems, retningssperre på høyre side i fotenden
<b>Feste for opphengskrok</b>	3 fester på hver side
<b>Farger</b>	Rammefarge Hvit eller Sølv. Velg mellom 12 farger på gavlene Se fargekart på side 4
<b>SWL Løftevekt</b>	225 kg

### Elektronikk

Linak system, IP66. Alle ledninger er spiralledninger.

### Rengjøring

Seta er meget rengjøringsvennlig. Vaske-og skyllemiddel bør være alkalisk. Ved manuell vask bør sprit-og kloropløsninger ha en lav konsentrasjon. Vaskemiddel bør være av en type som ikke bare desinfiserer, men også løser opp organisk fett.



Laveste  
høyde 38cm

Høyeste  
høyde 83cm

Ryggen kan  
heves til 70°

Anti-  
trendelenburg til 18 °

Trendelenburg  
til 18 °

Fowler / komfort  
sittstilling.  
Knevinkel til 65°

Hever  
bena

Lårstøtten kan  
heves til 40°

Fowler / komfort  
sittstilling tillet

## Detaljer verd å legge merke til



Sakseløft og glatte flater



Avtagbare, rengjøringsvennlige ABS-plater



Madrasstøtter



Avviserhjul



Lett forståelig håndkontroll



Betjeningspanel i fotenden ACC



Integrert sengeforlenger på 20cm



Hjul 150 mm, sentralbrems og retningsperre i høyre fotende



Integrert oppheng for universalbøyle begge sider



Uttrekkelig hylle ved fotenden til f.eks. sengetøy




Betjeningspanel i fotenden ACU (må oppgis ved bestilling)



Avviserhjul, horisontale og vertikale (må oppgis ved bestilling)



Håndkontroll med lys (må oppgis ved bestilling)

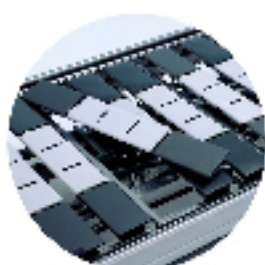

Komfort lamellbunn (må oppgis ved bestilling)



Universalbøyle art.nr. ST116263



Løftebøyle med trapes art.nr. ST140313



Holder for håndkontroll art.nr. ST183273



Urinflaskeholder art.nr. ST104693



Infusjonsstativ, rett art.nr. ST116264  
Infusjonsstativ, vinklet art.nr. ST141394

## Tilbehør:

Ytterligere tilbehør til Seta kan leveres.



Fargekart

01	05	09
02	06	10
03	07	11
04	08	12

ETAC AS,  
 Bråtengt. 66, Pb. 249, 1501 Moss  
 Tlf. 815 69 469 - Fax 69 27 09 11  
 E-post: hovedkontor@etac.no Internet: www.etac.no

Netthandel [www.smarteprodukter.as](http://www.smarteprodukter.as)

**etac**<sup>®</sup>  
 Skaper muligheter